

TOC 1500 HP

Generatore di carbonio organico totale

Numero dell'articolo: 42-1040 (230V) - UK | 42-1050 (230V) - EU | 42-1060 (110V) - US




Descrizione

La gamma di generatori TOC specializzati di Peak Scientific è stata progettata specificamente per fornire aria pulita, secca, priva di anidride carbonica e metano per gli analizzatori di carbonio organico totale. Erogando gas di trasporto o di combustione da un'alimentazione d'aria esterna, questi generatori sono disponibili in due modelli, a seconda delle vostre esigenze, il modello standard è adatto per carbonio organico non spurgabile (NPOC) mentre il modello HP è adatto per il processo TC-IC Totale Analizzatori di carbonio organico.



Tipi di applicazione

Analizzatori di TOC

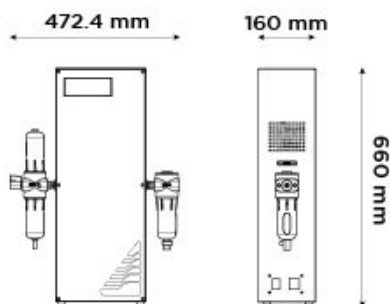

Generator Details

- **Tipo di gas:** Aria
- **Compressore integrato:** No

Caratteristiche principali

- Produce aria pulita, secca, priva di idrocarburi e anidride carbonica
- Ideale per analizzatori di TOC di processo TC-IC
- Esegue 24 ore su 24, 7 giorni su 7, se necessario
- Poche parti in movimento significano poca manutenzione e garantiscono una lunga durata del generatore
- Funzionamento completamente silenzioso
- Richiede una configurazione minima
- Può essere supportato dal compressore d'aria di precisione
- Garanzia on-site completa di 12 mesi

Specifiche tecniche

TOC 1500 HP Generatore di carbonio organico totale

Tipo di gas	Aria
Flusso massimo di gas:	1.5L/min
Pressione massima in uscita:	80psi/5,5bar
Pressione massima in uscita:	80psi/5,5bar
Purezza massima:	<1ppm CO2/ 0.1ppm THC
Raccordo uscite gas:	1x 1/4" BSP Female
Pressione di ingresso minima:	100psi/6,9bar
Pressione di ingresso massima:	120psi/8,3bar
Consumo di energia:	115 W
Voltaggio:	115 / 230 V ± 10%
Frequenza:	50 / 60 Hz
Corrente:	2.6 / 5.2 A
Temperatura operativa massima:	25°C / 77°F
Accreditamenti:	CE
Dimensioni (AxLxP) in mm	620 x 430 x 410 mm
Dimensioni (AxLxP) in pollici	24,4 x 16,9 x 16,1 inches
Peso del generatore	57kg / 125,4lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
- For service plans visit: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

